


八电极

快速使用指南

感谢您选择沃莱WELLAND 智能体脂秤，本说明页会快速帮助您使用本产品，如需了解更多请查阅说明书。

- 01 下载安装应用

扫描下方二维码或在应用市场搜索【】下载并安装App。




扫码下载APP
- 02 注册登录

在App主界面，根据向导完成帐号注册登录。



放UI
- 03 添加设备

打开蓝牙，在App内点击【我的】->【设备管理】->【+】，进入搜索之前请轻压称体或触摸称面屏幕按键【SET】使屏幕亮起。

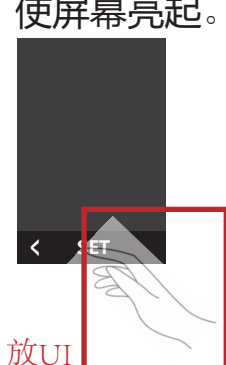

放UI


需手绘
- 04 连接设备

查找到需要绑定的设备进行连接，确保手机已打开蓝牙或WIFI，设备已处于开机状态




放UI
- 05 使用设备

轻踩秤体，等秤体屏幕显示0.0，双脚上秤，然后拉出手柄，先确保大拇指完整接触大拇指电极，再使其余手指的拇指有力接触相对电极。

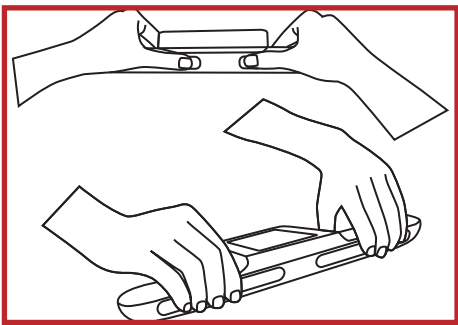


需手绘
- 06 注意事项

双臂自然伸直并与躯干保持 30°~45°，保持身体稳定，手臂不要接触腹部。

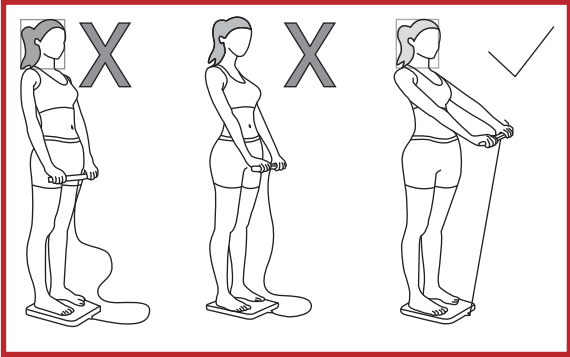

需手绘
- 07 注意事项

身体站直，双脚分开，先确保脚跟皮肤有效覆盖秤体下部电极，脚掌自然覆盖秤体上部电极。

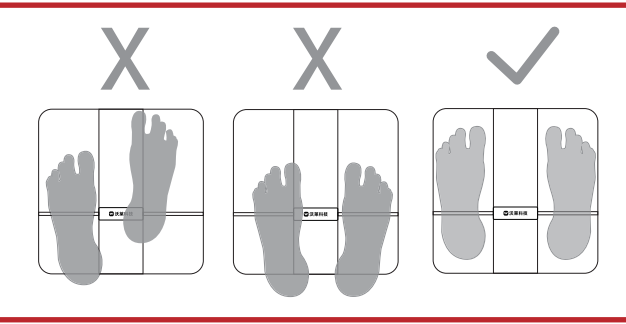

需手绘
- 08 测量数据

体脂测量中，请保持姿势并紧握手柄，待测量完成后方可下秤。



需手绘
- 09 测量完成

所有成分数据测量完成后会同步显示至手机【】App界面测试完成后，秤体在显示10秒后自动关机。



放UI


四电极

快速使用指南

感谢您选择沃莱WELLAND 智能体脂秤，本说明页会快速帮助您使用本产品，如需了解更多请查阅说明书。

- 01 下载安装应用

扫描下方二维码或在应用市场搜索【】下载并安装App。




扫码下载APP
- 02 注册登录

在App主界面，根据向导完成帐号注册登录。



放UI
- 03 添加设备

打开蓝牙，在App内点击【我的】->【设备管理】->【+】，进入搜索之前请轻压称体或触摸称面屏幕按键【SET】使屏幕亮起。

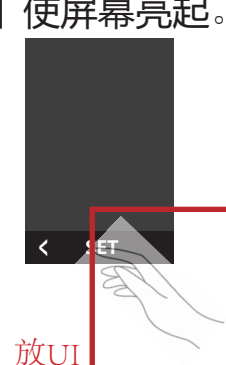

放UI


需手绘
- 04 连接设备

查找到需要绑定的设备进行连接，确保手机已打开蓝牙或WIFI，设备已处于开机状态




放UI
- 05 使用设备

将称放在平稳坚固的地面，屏幕自动归零后进行测量

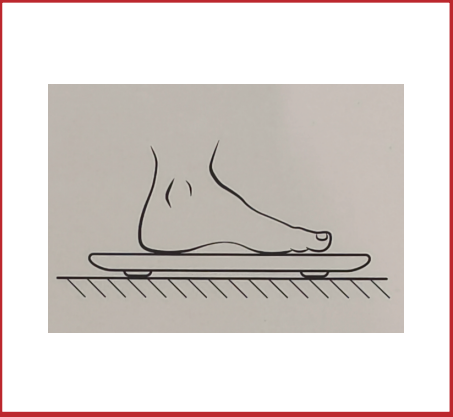


需手绘
- 06 注意事项

光脚上秤，双足分立与肩同宽，身体立正让体重均衡分于两足

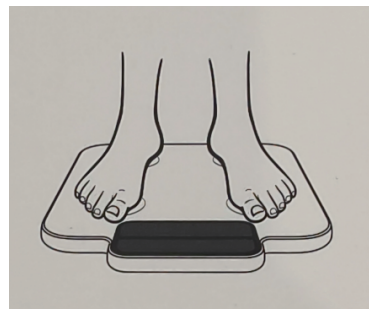

需手绘
- 07 注意事项

身体站直，双脚分开，先确保脚跟皮肤有效覆盖秤体下部电极，脚掌自然覆盖秤体上部电极。

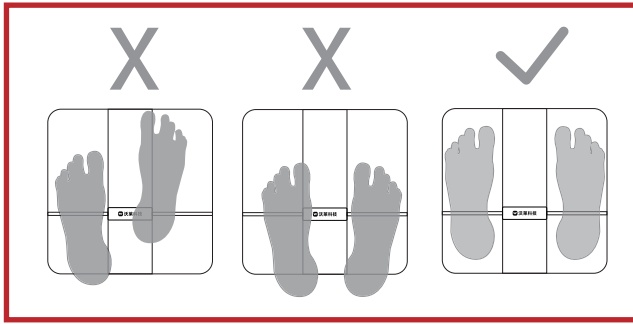

需手绘
- 08 测量数据

体脂测量中，请保持姿势待测量完成后方可下秤。



需手绘
- 09 测量完成

所有成分数据测量完成后会同步显示至手机【】App界面测试完成后，秤体在显示10秒后自动关机。



放UI